



BRUKSANVISNING FÖR

ello. För ett liv i rörelse

Förmodligen den säkraste rollatorn i Europa med komforten hos en elcykel.

1. Allmän information

1.1 Till ello

ello representerar den senaste utvecklingen inom området personlig mobilitet.

ello är den senaste generationens elektriska rollator som bygger på en innovativ integration av sensorteknik och mjukvarustyrning.

1.2 Varningar

Denna bruksanvisning innehåller varningar som viktas olika beroende på hur riskfyllda de är.

Följande varningar finns:

⚠ **FARA Omedelbar risk för människors liv och hälsa (allvarlig skada eller dödsfall)**

⚠ **VARNING Potentiell risk för personers liv och hälsa (allvarlig skada eller dödsfall)**

⚠ **FÖRSIKTIGHET Potentiellt farlig situation (lindriga personskador eller materiella skador)**

1.3 Livslängd

Tillverkaren räknar med en livslängd på fem år för ello, förutsatt att produkten används på avsett sätt och att alla underhålls- och skötselanvisningar följs. Produktens livslängd beror på användningsfrekvensen, driftsmiljön och underhållet. Produktens livslängd kan förlängas genom användning av reservdelar.

1.4 Garanti

Garantivillkoren är en del av de tillämpliga landsspecifika allmänna villkoren.

1.5 Förklaring av symboler

1.5.1 Symboler på ello



På/Av



Signalhorn

1.5.2 Symboler på produktmärkningen



CE-märkning – enheten är lämplig för godkänd för den europeiska marknaden



Medicinteknisk produkt – produkten är en medicinsk produkt



Unik enhetsidentifierare
Individuell produktidentifiering



Serienummer



Bruksanvisning



Höjd på rollatorn



Bredd på rollatorn



Max. vikt för användare



Produktreferens



Tillverkningsdatum



Tillverkare



Kassera inte enheten bland hushållssoporna

IP 2X

Skyddad mot fasta främmande föremål med diameter $\geq 12,5$ mm. Skyddad mot åtkomst med ett finger.

P X3

Skydd mot fallande föremål
Spruta vatten upp till 60° i lodrät riktning.

2. Säkerhet

2.1. Avsedd användning, indikation och kontraindikation

Avsedd användningello är ett förflyttningshjälpmedel och en tillfällig sittplats för personer med begränsad rörlighet. ello ger aktivt stöd vid gång med hjälp av motoriserad driv- och bromsassistans och underlättar transport av små laster vid måttlig lutning.

Indikationello är avsedd för personer med nedsatt rörlighet som behöver ett mobilt gånghjälpmedel för att stabilisera sin gång eller som vill öka sin rörelseräckvidd.

Typen av rörelsehinder avser vanligtvis styrka, koordination, balans eller smärta som orsakas av ansträngning.

KontraindikationerUtan någon av de ovan nämnda gångsvårigheterna kan användning av rollatorn leda till att gångförmågan försämras.

Rollatorn får inte användas av personer som väger mer än 120 kg.

Dessutom bör personer som inte kan kontrollera rollatorn på ett säkert sätt på grund av fysiska eller kognitiva begränsningar avstå från att använda den. Detta gäller bland annat:

- Personer med allvarliga balansstörningar.
- Personer med demenssjukdom.
- Personer som inte kan utföra specifika rörelser med sina fingrar (t.ex. trycka på knappar) på grund av kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar.
- Personer som inte kan använda rollatorns grundläggande funktioner, i synnerhet att aktivera och använda de mekaniska bromsarna.
- Människor som inte längre har båda händerna.
- Personer som inte längre har båda fötterna (detta gäller inte personer med proteser).

Dessutom bör personer som inte kan styra rollatorn på ett säkert sätt på grund av begränsad styrka och/eller koordination i händerna eller synnedsättning avstå från att använda rollatorn. Dessa innefattar bland andra:

- Personer med Parkinsons sjukdom, såvida inte sjukdomen fortfarande är i ett tidigt stadium och de drabbade har tillräckliga motoriska färdigheter för att använda ello.
- Blinda eller gravt synskadade personer.
- Döva eller gravt hörselskadade personer.

Denna lista är inte fullständig. Sjukdomar eller funktionshinder som inte finns med i förteckningen, men som orsakar liknande symtom eller begränsningar är också oförenliga med användningen av produkten.

2.2 Avsedd användning

Användningsområde ello är avsedd för lutningar på upp till 15 %. Stödkraften reduceras vid användning i branta backar. ello har skyddsklass IP23. Detta innebär att ello är skyddad både mot vattenstänk som faller uppifrån och mot inträngning av fasta främmande föremål med en diameter $\geq 12,5$ mm. ello har lampor och reflexer och är därför lämplig för användning i mörker.

Användning Rollatorn får endast användas av vuxna personer som har läst bruksanvisningen.

Rengöring och skötsel Allmänna rengörings- och underhållsarbeten på ellos får endast utföras av personer som har läst igenom denna bruksanvisning.

Underhåll och reparation Underhåll och reparationer får endast utföras av utbildad servicepersonal. Kontakta en serviceverkstad vid fel eller funktionsstörningar. Servicehandboken är tillgänglig för servicepersonal.

2.3 Icke avsedd användning

⚠ FARA Risk för personskada vid felaktig användning

Om ello inte används på avsett sätt kan personer utsättas för fara.

Inte i enlighet med den avsedda användningen innebär bland annat:

- Användning av obehöriga personer.
- Användning av personer som är sjuka, övertrötta eller påverkade av ämnen eller läkemedel som försämrar den visuella uppfattningen, koordinationen eller omdömet.
- Användning av ello som sittplats i kollektivtrafiken.
- Transport av en person som sitter på ello.
- Transport av bagage som överskrider väskans lastkapacitet.
- Används för att ta sig ner för trappsteg ≥ 20 cm.
- Används i trappor.
- Används om ello är defekt.
- Används vid ihållande regn, kraftigt regn eller halt väglag.
- Används i bastu eller liknande.
- Används av barn.
- Används utan kläder.
- Rengöring under rinnande vatten.

2.4 Faror vid användning av ello

2.4.1 Fara på grund av felaktiga sensorer

ello och dess sensorer är redundanta och har genomgått omfattande tester. Ändå kan felaktig sensorteknik leda till oväntade beteenden under vissa omständigheter.

- Stäng omedelbart av ello om den kan utgöra en fara. ello kan stängas av och användas som en vanlig rollator utan elstöd.
- Ta sedan med ello till din servicepartner innan du använder den igen.

2.4.2 Fara på allmänna transportmedel

Sitt inte på ello när du befinner dig i ett fordon. Det finns en hög risk för skador.

- Korrekt beteende i kollektivtrafiken beskrivs i kapitel 3.4

2.4.3 Fara när trappsteg ska överskridas

ello får aldrig användas i trappor eller för att gå nerför trappor ≥ 20 cm på grund av den höga fallrisken.

- ello måste fällas ihop och bäras för att klara trappor och höga avsatser.

2.4.4 Fara vid användning under ogynnsamma förhållanden

ello har svårt att få grepp på släta ytor och/eller i branta sluttningar.

- Använd endast ello på ytor och i situationer som har tillräcklig friktion.
- Om det saknas grepp ska du flytta ytterligare vikt till bakhjulen för att öka tryckkraften.

2.4.5 Fara vid användning som ståhjälpmedel

ello kan rulla bort under stödet när du står upp.

- Dra åt parkeringsbromsen innan du använder ello som uppresningshjälpmedel.

2.4.6 Faror när du sitter på ello

ello kan accelerera oavsiktligt om parkeringsbromsen inte är åtdragen.

- Dra åt parkeringsbromsen innan du sätter dig.

ello har endast begränsad förmåga att förhindra att den rullar iväg i en sluttning när användaren sitter på den.

- Använd endast ello som sittplats när den är platt.

ello får aldrig användas för att transportera människor.

ello måste stå helt stilla när den används som sittplats; om ryggbältet inte är monterat/felaktigt monterat kan en tillbakalutning leda till fall.

- Innan du sätter dig ner, kontrollera att ryggbältet är korrekt monterat.
- Kontrollera att handtagen är inställda på den höjd som motsvarar din längd.

Det finns en viss risk för att könsorganet kläms fast.

- Du bör därför endast använda ello som en sittplats med kläderna på.

2.4.7 Fara på grund av överlastning av väskan

Överlastning av väskan kan försämra köregenskaperna och leda till en farlig situation.

- Lasta väskan på ello med maximalt 5 kg.

2.4.8 Fara vid användning av hinderknappen

Om du trycker på hinderknappen avaktiveras den automatiska bromsfunktionen i sluttningar och detta kan leda till fall.

- Öka istället konditionsnivån om bromseffekten i nedförsbackar är för stark.

2.4.9 Faror vid laddning av batteriet

Batterier kan bli varma och börja brinna under laddningsprocessen – särskilt om komponenterna är skadade.

- Kontrollera att laddaren och batteriet inte är skadade före laddning.
- Ladda batteriet på en torr plats, på tillräckligt avstånd från brandfarliga material.

Olämpliga laddare kan orsaka ökad risk för brand.

- Använd endast den medföljande laddaren.

Risk för snubbling när kabeln är inkopplad.

- Ta bort laddningskabeln innan du använder ello.

2.4.10 Faror på grund av felaktig hantering av batteriet

Skador på eller ingrepp i batteriet kan leda till personskador

- Använd endast ello-batterier
- Utsätt inte batteriet för stark värme, direkt solljus eller eld.
- Undvik att batteriet kommer i kontakt med brandfarliga material.
- Kontrollera att batteriet inte är skadat före användning och sluta använda det om det är skadat.
- Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.

2.5 Fara på grund av elektromagnetisk strålning

ello är i stort sett okänslig för störningar från radiovågor i vardagen och har genomgått lämpliga stresstester. Men eftersom ello är en elektrisk enhet kan en negativ påverkan från radiovågor inte helt uteslutas. I miljöer med hög strålningsexponering (t.ex. sjukhus) kan ello därför uppträda oväntat.

- I detta fall ska du stänga av ello.
- Informera omedelbart din elloåterförsäljare.

2.6 Fara på grund av elektrisk spänning

ello drivs av elektrisk ström med en spänning på upp till 29,4 V. Om du vidrör spänningsförande komponenter eller batteriet kan det leda till farliga skador och brännskador.

- Reparationer får endast utföras av utbildad personal.

2.7 Fara på grund av höga temperaturer

Följande avsnitt innehåller information om faror på grund av heta ytor. För att undvika detta bör följande anvisningar följas:

ello

Solstrålning och värme från omgivningen (t.ex. i en bil) kan leda till att särskilda metalldelar värms upp avsevärt. Det finns risk för hudskador vid direkt hudkontakt med dessa ytor.

- Skydda enheten från starkt solljus och andra värmekällor.
- Låt ytorna svalna före användning.

Batteri

Batteriet kan värmas upp under drift. Det finns en liten risk för brännskador vid direktkontakt.

- I dessa fall ska du låta batteriet svalna innan du tar ut det.

2.8 Säkerhetsfunktioner

ello har ett antal säkerhetsfunktioner som är en del av säkerhetskonceptet.

2.8.1 Säker inbromsning i händelse av funktionsfel

- Om ello upptäcker ett fel som kan påverka enhetens säkerhet, bromsar den innan den stängs av.

2.8.2 Belysning och reflektorer

- 2x framljus (vitt)
- 2x bakljus (rött)
- 1x golvbelysning (vit)
- Automatisk aktivering med ljussensor
- Reflektorer på hjulen

2.8.3 Förebyggande av fallolyckor

- Nödbromsning. ello bromsar kraftigt om en viss acceleration överskrids.
- Accelerationströskeln beror på den valda konditionsnivån.

2.8.4 Handigenkänning

- ello bromsar automatiskt om ingen hand registreras på handtaget.
- I en sluttning rullar ello långsamt längre ned för att påminna användaren om att aktivera parkeringsbromsen.

2.8.5 Maximal hjulvinkel

- För att förhindra tippning bakåt stannar motorassistenten när hinderknappen trycks in så snart som en viss lutningsvinkel överskrids.

2.8.6 Broms- och assistansreglering

- Framåtriktad assistans – i uppförsbacke och när hinderknappen trycks in – avaktiveras när bromsen aktiveras.
- ello bromsar elektriskt om de mekaniska bromsarna är för löst inställda.
- ello bromsar elektriskt när de mekaniska bromsarna är ansatta.
- Säkerhetsmekanism för hinderknappen:
 - ➔ Det extra stödet när man trycker på hinderknappen fungerar bara om en hand på det högra handtaget går att identifiera.
 - ➔ Bromsen avaktiverar hinderknappens funktion.

2.8.7 Detektering av veck

- ello känner av när den är ihopfälld och stänger av sig själv.

2.8.8 Signalfärg vid höjdjustering

- Ett orangefärgat element varnar dig om handtagens höjdjustering inte har fästs på rätt sätt.

2.8.9 Funktionsbegränsning under laddningsprocessen

- ello får inte användas elektriskt under laddningsprocessen för att minimera risken för att snubbla över laddningskabeln.

2.8.10 Ryggbälte

- ellos ryggbälte hindrar dig från att falla baklänges av enheten när du använder sitsen.

2.8.11 Brandskydd

- Materialet i batterilådan har en brandskyddsklassning på V-1 (UL 94) för att minska risken för brand på grund av batteriet.

2.8.12 Förhindra brännskador

- Handtag, säten och ryggbälten är tillverkade av material som är dåliga på att överföra värme till människokroppen.
- Sätena är inte svarta och värms därför upp mindre i solen.

2.8.13 Sittytor med profil

- Profilen i sätena minskar sannolikheten för att du oavsiktligt glider av sätet.

3. Produktbeskrivning

3.1 Översikt över funktioner


ello är mycket enkel att använda och arbetar utifrån sensordata.

ello känner av lutningar och anpassar sig automatiskt: Den bromsar i nedförsbackar och ger stöd i uppförsbackar.

Ytterligare, mer kraftfull elektrisk assistans kan aktiveras med hjälp av hinderknappen. Detta hjälper till att lyfta framhjulen (wheelie) för att ta sig över hinder eller underlättar körning i ojämn terräng. Funktionen är inte avsedd att dra in användaren permanent.

Om ello är påslagen är ytterligare säkerhetsfunktioner aktiva. När ello är avstängd kan den användas som en vanlig rollator.

3.2 Komponenter

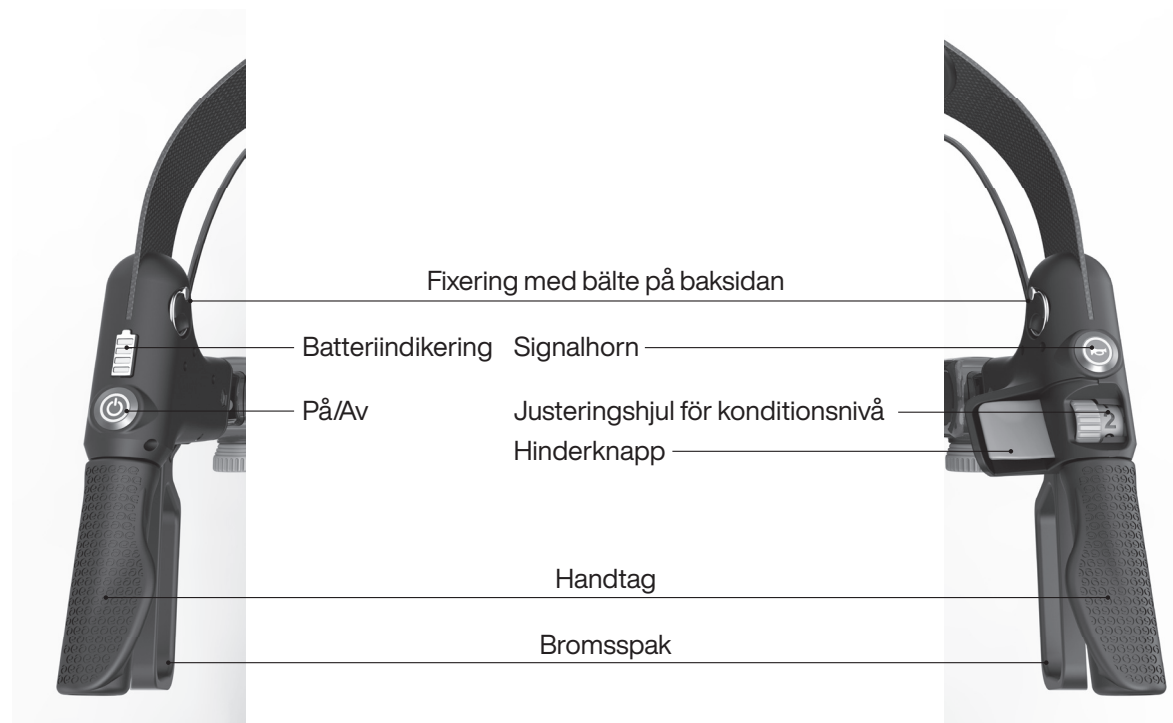



3.3 Drift

3.3.1 Bromsar

⚠ **FÖRSIKTIGHET** Lägg i parkeringsbromsen under pauser.
ello kan rulla iväg utan uppsikt – särskilt i sluttningar.
Dra därför alltid åt parkeringsbromsen vid pauser.



Körbroms: Dra bromsspaken uppåt



Dra åt parkeringsbromsen: Tryck ner bromsspaken tills den låser fast. För att lossa parkeringsbromsen drar du spaken uppåt (till neutralläget).

3.3.2 Ställ in konditionsnivå

Ju bättre kondition du har, desto högre konditionsnivå bör du välja. Nivån är personligt anpassad och behöver inte ändras i vardagen.

Konditionsnivån påverkar:

- Bromsstödet i nedförsbacke. Ju högre konditionsnivå, desto mindre saktar ello ner.
- Beteende vid användning av hinderknappen. Ju högre konditionsnivå, desto starkare är hinderfunktionen.



3.3.3 Körning på plan mark

ello drar inte självständigt på plan mark.

- Extra stöd kan aktiveras på tuffa underlag genom att trycka på hinderknappen.
- alla säkerhetsfunktioner är aktiva.

3.3.4 Körning i uppförsbacke

- ello känner automatiskt av lutningar och ger stöd i enlighet med detta – endast för att kompensera för sin egen vikt, inte för att dra användaren.
- Assistansen avaktiveras när bromsarna aktiveras.
- Ytterligare stöd kan aktiveras genom att trycka på hinderknappen.
- Säkerhetsfunktionerna i ello är aktiva.

3.3.5 Körning i nedförsbacke

⚠ FARA Använd inte hinderknappen i nedförsbacke.

Genom att trycka på hinderknappen avaktiveras den automatiska bromsfunktionen i sluttningar – risk för fall!

- ello känner automatiskt av lutningar och bromsar därefter.
- Bromskraften beror på den inställda konditionsnivån:
 - Högsta nivå: Svag bromseffekt.
 - Lägsta nivå: Stark bromseffekt.
- ➔ Öka konditionsnivån om bromseffekten i nedförsbackar är för stark.
- Du kan också bromsa mekaniskt med hjälp av bromsspakarna – precis som med en vanlig rollator.
- Säkerhetsfunktionerna i ello är aktiva.

3.3.6 Sitter på ello

⚠ **FARA Glöm inte att koppla in parkeringsbromsarna.**

ello kan accelerera oavsiktligt om parkeringsbromsen inte är åtdragen – stor risk för fall!

⚠ **WARNING ello ska endast användas som sittplats i plant läge.**

ello har endast begränsad förmåga att förhindra att den rullar iväg i en sluttning när användaren sitter på den.

1. Dra åt parkeringsbromsarna.
2. Se till att ryggbältet är korrekt monterat och att fästet är i jämnhöjd med handtaget (se bild).
3. Sätt dig försiktigt på ello.



3.3.7 Övervinna hinder med ello

1. Dra ello något mot dig och tryck samtidigt på hinderknappen.
2. Framhjulen lyfts upp. Skjut framhjulen över hindret och släpp hinderknappen.
3. Dra åt bromsen. Framhjulen landar på marken igen.
4. Skjut bakhjulen över hindret.
5. Tryck vid behov på hinderknappen igen.

3.3.8 Nedåtgående avsats

⚠ **WARNING Använd inte ello för att ta dig ner för trappsteg ≥ 20 cm.**

ello kan välta om du försöker kliva av från ett för högt trappsteg – risk för fall!

- ello bromsar automatiskt vid nedförsbacke för att minimera risken för fall – både vid nedförsbacke framåt och bakåt.

3.3.9 Förstå batteriindikatorn

- Batteriindikatorn på det vänstra handtaget har 4 (fyra) laddningsstaplar.
- Ladda batteriet senast när endast 2 (två) laddningsstaplar (orange) tänds.
- När den sista laddningsstapeln blinkar rött är ello i energisparläge. Vissa funktioner kan endast användas i begränsad omfattning i energisparläget.

💡 **Tips:** Stäng av ello när du inte använder den för att spara på batteriet.

3.3.10 Signalhorn

- Tryck på signalhornet (på höger handtag).



3.4 Hantering

3.4.1 förbered ello för användning

⚠️ **FÖRSIKTIGHET Risk för fastklämning vid fällning.**

Du kan klämma fingrarna om du öppnar rollatorn slarvigt.

1. Se till att parkeringsbromsarna är åtdragna.
2. Ta bort transportlåset.
3. Fäll försiktigt ut ello och kontrollera att den är helt utfälld.
4. Kontrollera din personliga konditionsnivå (inställningshjul på höger handtag).
5. Slå på ello (tryck och håll in på/av-knappen i 1 sekund).
6. Lossa parkeringsbromsarna.



3.4.2 Förvara ello efter användning

⚠ FÖRSIKTIGHET Förvara ello på rätt sätt.

Förvara ello på en torr plats för att förhindra skador.

1. Dra åt parkeringsbromsarna.
2. Du kan antingen stänga av ello eller fälla ihop den (enheten stängs av automatiskt när den fälls ihop).
3. Valfritt: Sätt fast transportlåset.

3.4.3 Transport med bil

1. Fäll ihop ello.
2. Fäst transportlåset för att förhindra oavsiktlig utfällning.
3. Lyft in ello i bilen.

💡 Tips:

- Ta bort batteriet för att minska vikten.
- Ställ in handtagets höjd på lägsta nivån för att minska dimensionerna.



3.4.4 Transport med kollektivtrafik

⚠ FARA Använd inte ello i kollektivtrafiken – stor risk för fallolyckor.

ello är inte en lämplig sittplats i kollektivtrafiken på grund av hjulen.

1. Parkera ello i det avsedda området.
2. Lägg i parkeringsbromsarna.
3. Sätt dig på en märkt plats.

3.4.5 Lyft upp

⚠ VARNING Lyft ello försiktigt – risk för fall.

Lyft endast ello om du är fysiskt kapabel att göra det. Annars kan du be om hjälp.

1. Fäll ihop upp ello
2. Sätt fast transportlåset
3. Greppa ello i det fällbara handtaget och ramen



3.4.6 Ladda batteriet

⚠ **FARA** Utsätt inte batteriet för stark sol/värme.

Ladda inte ello-batteriet i solen.

Ladda batteriet i enheten

1. Sätt in laddaren i batteriet genom öppningen i batterifacket.
2. Anslut laddaren till vägguttaget.
 - Batteriindikatorn blinkar under laddningsprocessen.
 - ello fungerar inte när den laddas.

Laddning av det borttagna batteriet

1. Öppna batterifacket och ta ut batteriet.
2. Anslut laddaren till batteriet.
3. Anslut laddaren till vägguttaget.

LED-display på laddaren

Grönt: Batteriet är fulladdat eller inte anslutet.

Orange: Batteriet laddas.

3.5 Inställning

3.5.1 Välj rätt höjd på handtaget

⚠ **FÖRSIKTIGHET** Ställ in handtagets höjd korrekt.

En felaktigt vald handtagshöjd kan leda till problem med hållningen.

1. Handtagets övre kant ska vara i handledshöjd (se bilden).
2. Kontrollera att båda handtagen är inställda på samma höjd.



Minsta handtagshöjd: 80 cm


Maximal handtagshöjd: 100 cm

3.5.2 Justering av handtagen

⚠ **FÖRSIKTIGHET** Kontrollera att höjdjusteringen är korrekt monterad.

Så länge som den orangefärgade komponenten är synlig är höjdjusteringen inte korrekt fixerad.

1. Vrid vridknappen moturs ↺.
2. Dra i vridknappen och ställ in önskad höjd.
3. Släpp vridknappen och låt den låsas fast.
4. Vrid vridknappen medurs ↻ för att stänga.

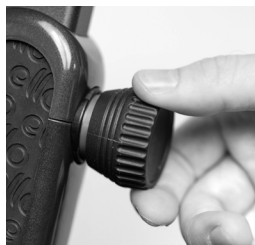


3.5.3 Finjustera bromskraften

⚠ **FARA** Kontrollera bromsinställningarna regelbundet.

Felaktigt inställda bromsar kan leda till allvarliga olyckor.

1. Lossa fästmuttern (A) → vrid den moturs (i riktning "+").
2. Ställ in bromskraften → vrid på justerskruven (B):
 - Öka bromsen → (B) vrid moturs (i "+"-riktningen).
 - Lossa bromsen → vrid (B) medurs (i riktning mot "-").
3. Dra åt fästmuttern (A) igen → ett varv medurs (i riktning mot "-").

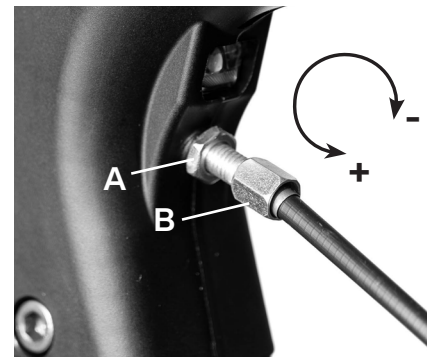

3.5.4 Skötsel och underhåll

⚠ FÖRSIKTIGHET Rengör inte med rinnande vatten.

Rengöring med rinnande vatten/högtryck kan skada ello.

- Rengör ello med en fuktig trasa.
- Använd vid behov desinfektionsmedel eller ett mildt rengöringsmedel.
- Undvik stora mängder vätska eller aggressiva rengöringsmedel.
- Låt din servicepartner regelbundet (minst var sjätte månad) utföra service på ello.

4. Felindikering

Felkod	Orsak	Vad behöver göras?
Knapparna blinkar blått. Rollatorn fungerar inte.	Sensorer känner av att ello är ihopfälld.	Se till att ello är helt utfälld. Ta ello till en serviceverkstad om det behövs.
Knapparna blinkar gult. Funktionerna kan vara begränsade.	ello överhettas eller känner av tillfälliga spänningsfall.	Stäng av ello tillfälligt och låt den svalna om det behövs.
Knapparna lyser gult. Funktionerna kan vara begränsade.	Felet har identifierats.	ello kan användas med kort varsel. Lämna genast in den till serviceverkstaden.
Knapparna lyser rött. De elektriska funktionerna är avstängda.	Allvarligt fel hittat.	Stäng av ello och lämna in den på serviceverkstad.

5. Information om batteriet

1. Allmänt

- Spetsa eller skada inte batteriet på något annat sätt.
- Tappa inte batteriet.
- Ta inte bort batterifacket.
- Håll batterikontakterna borta från metallföremål för att undvika kortslutning.

2. Transport

- Undvik temperaturer över 60 °C och under -10 °C under transport.
- Undvik kraftiga stötar och mekaniska belastningar under transport.

3. Förvaring

- Förvara batteriet på en torr och sval plats.
- Skydda batteriet mot eld och liknande värmekällor.
- Undvik kontakt med vätskor, särskilt vatten.
- Förvara batteriet med en laddning på ca 50-70 % för att öka livslängden.
- Förvaringstemperaturen bör ligga mellan 15 °C och 25 °C.

4. Avfallshantering

- Släng aldrig batteriet i hushållsavfallet.
- Batteriet kan återlämnas till den fackhandlare där ello köptes. Alternativt kan du lämna in batteriet till en auktoriserad återvinningscentral eller samlingsställe.
- Tejpa kontakterna för att förhindra kortslutning innan de kasseras.
- Vid återvinning på annan plats, se till att lokala miljöstandarder följs.

6 Tekniska specifikationer

6.1 Enhet

	max. belastning	
Användarens vikt	120 kg	
Lastning av väska	5 kg	
	Modell 55R/G/B	Modell 62R/G/B
Sitthöjd	55 cm	62 cm
Handtagets höjd	80 cm – 100 cm	80 cm – 100 cm
	utfälld	vikt
Bredd	64 cm	34,5 cm
Djup	72,5 cm	72,5 cm
	utan batteri	med batteri
Vikt	12 kg	12,2 kg
Skyddsklass	IP23	
Drifttemperaturområde	-10 °C – 40 °C	

6.2 Batteri

Snäll	Laddningsbart li-jon-batteri
Massa	ca 430 g
Nominell kapacitet	3,2 Ah
Spänning	Drift: 25,9 V Laddar: 29,4 V
Energikapacitet	82,88 Wh → Lämplig för transport i flygplan (handbagage)
Rekommenderad brandsläckare	Torrt pulver
Laddningsström	1 A
Drifttid (vid genomsnittlig användning)	1 vecka
Drifttemperaturområde	Urladdning (användning): -20 °C ~ 55 °C Laddning: 0 °C ~ 45 °C
Temperaturområde för lagring	-10 °C ~ 60 °C

Tillverkare

VOSS healthcare GmbH
Jülicher Straße 306
52070 Aachen
Tyskland
www.voss-healthcare.net
info@voss-healthcare.net
+49 241 510 056 22

Butik för medicinsk utrustning



Denna produkt uppfyller kraven i förordning (EU)
2017/745 om medicintekniska produkter.

Artikelnummer: 7011495000

Version: v01.OSWE

ello
by VOSS healthcare