



GEBRUIKSAANWIJZING

ello. Voor een leven in beweging

Waarschijnlijk de veiligste rollator in Europa met het comfort van een e-bike.

1. Algemene informatie

1.1 Over ello

ello weerspiegelt de nieuwste ontwikkeling op het gebied van persoonlijke mobiliteit.

ello is een elektrische rollator van de nieuwste generatie, gebaseerd op een innovatieve integratie van sensortechnologie en softwarebesturingen.

1.2 Waarschuwingen

Deze gebruiksaanwijzing bevat waarschuwingen die gerangschikt zijn naar de zwaarte van het risico.

De volgende waarschuwingen worden gebruikt:

⚠ GEVAAR Direct gevaar voor het leven en de gezondheid van personen
(ernstig letsel of overlijden)

⚠ WAARSCHUWING Mogelijk gevaar voor leven en gezondheid van personen
(ernstig letsel of overlijden)

⚠ LET OP Mogelijk gevaarlijke situatie (licht letsel of materiële schade)

1.3 Levensduur

De fabrikant gaat uit van een levensduur van vijf jaar voor ello, mits het product correct wordt gebruikt voor het beoogde gebruikdoel en alle onderhouds- en verzorgingsinstructies worden opgevolgd. De levensduur van het product is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de gebruiksomgeving en het onderhoud. De levensduur van het product kan worden verlengd door reserveonderdelen te gebruiken.

1.4 Garantie

De garantievoorwaarden maken deel uit van de toepasselijke landspecifieke algemene voorwaarden.

1.5 Betekenis van symbolen

1.5.1 Symbolen op de ello



Aan/Uit



Claxon

1.5.2 Symbolen op productlabels



CE-markering - apparaat is voor de Europese markt toegelaten



Medisch hulpmiddel - Het apparaat is een medisch product



Unique Device Identifier – Individuele productaanduiding



Serienummer



Gebruiksaanwijzing



Hoogte van de rollator



Breedte van de rollator



Max. gebruikersgewicht



Product referentie



Productiedatum



Fabrikant



Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval

IP 2X

Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter $\geq 12,5$ mm. Beschermd tegen toegang met één vinger.

P X3

Bescherming tegen vallend sproeiwater tot 60° ten opzichte van de verticale lijn.

2. Veiligheid

2.1. Beoogd gebruiksdoel, indicatie en contra-indicatie

Bedoeld gebruiksdoelello is een mobiliteitshulpmiddel en tijdelijke zitgelegenheid voor mensen met beperkte mobiliteit. ello biedt actieve ondersteuning bij het lopen door middel van gemotoriseerde aandrijving en remondersteuning en vergemakkelijkt het vervoer van kleine lasten op niet te steile hellingen.

Indicatieello is bedoeld voor mensen met beperkte mobiliteit die een mobiel loophulpmiddel nodig hebben om hun looppatroon te stabiliseren of die hun bewegingsbereik willen vergroten.

Het type mobiliteitsbeperking heeft meestal te maken met kracht, coördinatie, evenwicht of pijn veroorzaakt door inspanning.

Contra-indicatiesZonder een van de bovengenoemde loopbeperkingen kan het gebruik van de rollator leiden tot een verslechtering van de loopvaardigheid.

De rollator mag niet gebruikt worden door personen die meer dan 120 kg wegen.

Bovendien zouden mensen die de rollator niet veilig onder controle kunnen houden vanwege fysieke of cognitieve beperkingen de rollator niet moeten gebruiken. Dit betreft onder andere:

- Mensen met ernstige evenwichtsstoornissen.
- Mensen met dementie.
- Mensen die door cognitieve of motorische beperkingen niet in staat zijn om specifieke bewegingen met hun vingers uit te voeren (bijvoorbeeld op knoppen drukken).
- Mensen die niet in staat zijn om de basisfuncties van een rollator te gebruiken, in het bijzonder het activeren en bedienen van de mechanische remmen.
- Mensen die niet meer beide handen hebben.
- Mensen die niet meer beide voeten hebben (dit geldt niet voor mensen met prothesen).

Bovendien zouden mensen die niet in staat zijn om de rollator veilig te besturen vanwege beperkte kracht en/of coördinatie van de handen of vanwege visuele beperkingen de rollator niet moeten gebruiken. Daartoe behoren onder andere:

- Mensen met de ziekte van Parkinson, tenzij de ziekte nog in een vroeg stadium is en de betrokkenen voldoende motorische vaardigheden hebben om de ello te bedienen.
- Blinden of ernstig slechthorende personen.
- Dove of ernstig slechthorende personen.

Deze lijst is echter niet volledig. Ziekten of handicaps die hier niet worden genoemd, maar die vergelijkbare symptomen of beperkingen veroorzaken, zijn ook niet verenigbaar met het gebruik van het product.

2.2 Correct gebruik voor het beoogde gebruiksdoel

Gebruikslocatiesello is ontworpen voor hellingshoeken tot 15%. De ondersteuningsprestaties nemen af bij gebruik op steilere hellingen. ello heeft beschermingsgraad IP23. Dit betekent dat ello zowel beschermd is tegen vallend spatwater dat van boven valt als tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een diameter $\geq 12,5$ mm. ello heeft verlichting en reflectoren en is daarom geschikt voor gebruik in het donker.

BedieningDe rollator mag alleen bediend worden door volwassenen die de gebruiksaanwijzing hebben gelezen.

Reiniging & OnderhoudAlgemene reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de ello mogen alleen worden uitgevoerd door personen die deze gebruiksaanwijzing hebben gelezen.

Onderhoud & ReparatieOnderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door daarvoor geïnstrueerd en opgeleid onderhoudspersoneel. Neem contact op met een servicecentrum in geval van storingen of defecten. De servicehandleiding is beschikbaar voor onderhoudspersoneel.

2.3 Oneigenlijk, niet toegelaten gebruik

⚠ **GEVAAR Risico op letsel door onjuist en oneigenlijk gebruik**

Als ello niet wordt gebruikt zoals bedoeld, kunnen personen risico's lopen en in gevaar worden gebracht.

Oneigenlijk, niet toegelaten gebruik betekent onder andere:

- Gebruik door onbevoegde personen.
- Gebruik door personen die ziek, oververmoeid of onder invloed van stoffen of medicijnen zijn die hun visuele waarneming, coördinatie of beoordelingsvermogen aantasten.
- Gebruik van ello als zitgelegenheid in het openbaar vervoer.
- Vervoeren van een persoon die op een ello zit of is gezet.
- Bagage vervoeren die het laadvermogen van de tas overschrijdt.
- Gebruik om over treden van ≥ 20 cm af te dalen.
- Gebruik op trappen.
- Gebruik als de ello defect is.
- Gebruik bij aanhoudende regen, hevige regen of gladheid.
- Gebruik in sauna's en dergelijke.
- Gebruik door kinderen.
- Ongekleed gebruik.
- Reiniging onder stromend water.

2.4 Gevaren bij gebruik van de ello

2.4.1 Gevaar door defecte sensoren

ello en zijn sensoren zijn redundant uitgevoerd en uitgebreid getest. Toch kan defecte sensortechnologie onder bepaalde omstandigheden tot onverwacht gedrag leiden.

- Schakel ello meteen uit als zich omstandigheden voordoen, die gevaar kunnen opleveren. ello kan dan uitgeschakeld en gebruikt worden als een gewone rollator zonder elektrische ondersteuning.
- Breng ello dan naar uw service-adres voordat u hem opnieuw gebruikt.

2.4.2 Gevaar in het openbaar vervoer

Ga niet op de ello zitten als u zich in een voertuig bevindt. Er bestaat anders tijdens ritten een hoog risico op letsel.

- Correct gedrag in het openbaar vervoer wordt beschreven in hoofdstuk 3.4

2.4.3 Gevaar bij het passeren van op- en afstapjes

ello mag vanwege het hoge valrisico nooit worden gebruikt op trappen of voor het afstappen van treden ≥ 20 cm.

- ello moet ingeklapt en gedragen worden om trappen en hoge op- en afstapjes te kunnen passeren.

2.4.4 Gevaar bij gebruik onder ongunstige omstandigheden

ello heeft moeite om voldoende grip te ontwikkelen op gladde oppervlakken en/of steile hellingen.

- Gebruik ello alleen op oppervlakken en in situaties die voldoende frictie en grip toelaten.
- Verleg bij een gebrek aan grip extra gewicht naar de achterwielen om de aandrukkracht te verhogen.

2.4.5 Gevaar bij gebruik als hulpmiddel om op te staan

ello kan wegrollen als u erop steunt bij het opstaan.

- Trek de parkeerrem aan voordat je de ello als hulpmiddel om op te staan gebruikt.

2.4.6 Gevaren bij het zitten op de ello

ello kan onbedoeld beginnen te rollen (accelereren) als de parkeerrem niet is aangetrokken.

- Trek de parkeerrem aan voordat u gaat zitten.

ello heeft slechts een beperkte mogelijkheid om wegrollen op een helling te voorkomen als de gebruiker erop zit.

- Gebruik de ello alleen op een horizontaal ondergrond als zitplaats.

ello mag nooit worden gebruikt om mensen mee te vervoeren.

de ello moet volledig stilstaan als hij als zitplaats wordt gebruikt; als de rugriem niet/onjuist is aangebracht, kan achterover leunen leiden tot een val.

- Controleer voordat u gaat zitten of de rugriem goed gemonteerd is.
- Controleer of de handgrepen zijn ingesteld op de hoogte die overeenkomt met uw lichaamslengte.

Er bestaat een zeker risico op beknelling in het genitale gebied.

- Gebruik ello daarom alleen als zitplek met uw kleren aan.

2.4.7 Gevaar door overbelasting van de tas

Overbelasting van de tas kan de rijeigenschappen nadelig beïnvloeden en tot een gevaarlijke situatie leiden.

- Belaad de tas van de ello met maximaal 5 kg.

2.4.8 Gevaar bij gebruik van de obstakelknop

Als u op de obstakelknop drukt, wordt de automatische remfunctie op hellingen uitgeschakeld en kunt u ten val komen.

- Verhoog in plaats daarvan het fitness-level als de remwerking bergaf te sterk is.

2.4.9 Gevaren bij het opladen van de accu

Accu's kunnen tijdens het opladen heet worden en gaan branden - vooral als er onderdelen beschadigd zijn.

- Controleer de lader en de accu op beschadigingen voordat u gaat opladen.
- Laad de accu op in een droge ruimte, op voldoende afstand van ontvlambare materialen. Ongeschikte laders kunnen een verhoogd risico op brand veroorzaken.
- Gebruik alleen de meegeleverde acculader.

Risico op struikelen wanneer de laadkabel is aangesloten.

- Verwijder de laadkabel voordat u de ello weer gaat gebruiken.

2.4.10 Gevaren door onjuiste omgang met de accu

Beschadiging of manipulaties van de accu kunnen leiden tot persoonlijk letsel

- Gebruik uitsluitend ello-accu's
- Stel de accu niet bloot aan overmatige hitte, direct zonlicht of vuur.
- Vermijd contact van de accu met ontbrandbare materialen.
- Controleer de accu voor gebruik op beschadigingen en gebruik hem niet meer als hij beschadigd is.
- Stel de accu niet bloot aan mechanische schokken.

2.5 Gevaar door elektromagnetische straling

ello is grotendeels ongevoelig voor interferentie door radiogolven in het dagelijkse leven en werd daarvoor onderworpen aan passende belastingstesten. Omdat ello een elektrisch apparaat is, kan een negatieve invloed van radiogolven echter niet volledig worden uitgesloten. In omgevingen met een hoge stralingsbelasting (bijv. ziekenhuizen) kan ello zich daarom onverwacht gedragen.

- Schakel in dit geval ello uit.
- Informeer onmiddellijk uw ello-dealer.

2.6 Gevaar door elektrische spanning

ello werkt met elektrische stroom met een spanning tot 29,4 V. Het aanraken van spanning voerende onderdelen of de accu kan gevaarlijk letsel en brandwonden tot gevolg hebben.

- Laat reparaties alleen uitvoeren door daarvoor opgeleid personeel.

2.7 Gevaar door hoge temperaturen

Het volgende hoofdstuk bevat informatie over de gevaren van hete oppervlakken. Neem de volgende instructies in acht om deze te vermijden:

ello

Zonnestraling en omgevingswarmte (bijv. in een auto) kunnen ervoor zorgen dat met name metalen elementen aanzienlijk opwarmen. Bij direct huidcontact met deze oppervlakken bestaat er een risico op huidletsel.

- Bescherm het apparaat tegen sterk zonlicht en andere warmtebronnen.
- Laat de oppervlakken afkoelen voor gebruik.

Accu

De accu kan heet worden tijdens gebruik. Er bestaat dan een klein risico op brandwonden bij direct contact.

- Laat in deze gevallen de accu afkoelen, voordat u deze verwijdt.

2.8 Veiligheidsfuncties

ello heeft een aantal veiligheidsfuncties die deel uitmaken van het veiligheidsconcept.

2.8.1 Veilig remmen in geval van een storing

- Als ello een fout detecteert die de veiligheid van het apparaat kan beïnvloeden, remt hij af voordat hij zich uitschakelt.

2.8.2 Verlichting en reflectoren

- 2x koplampen (wit)
- 2x achterlichten (rood)
- 1x bodem-/vloerverlichting (wit)
- Automatische activering door lichtsensor
- Reflectoren op de wielen

2.8.3 Valpreventie

- Noodremming. ello remt sterk af, als een bepaalde acceleratie wordt overschreden.
- De acceleratiedrempel hangt af van het geselecteerde fitness-level.

2.8.4 Handherkenning

- ello remt automatisch als er geen hand op de handgreep wordt waargenomen.
- Op een helling rolt ello langzaam verder naar beneden om de gebruiker eraan te herinneren de parkeerrem te activeren.

2.8.5 Maximale wheelie-hoek

- Om achteruit kantelen te voorkomen, stopt de motorondersteuning wanneer de obstakelknop wordt ingedrukt zodra een bepaalde hellingshoek wordt overschreden.

2.8.6 Rem- en ondersteuningsbesturing

- Voorwaartse ondersteuning - bergop & bij bediening van de obstakelknop - wordt uitgeschakeld wanneer een rem wordt bediend.
- ello remt elektrisch als de mechanische remmen te los zijn afgesteld.
- ello remt elektrisch wanneer de mechanische remmen worden bediend.
- Veiligheidsmechanisme voor de obstakelknop:
 - ➔ De extra ondersteuning bij het indrukken van de obstakelknop werkt alleen als een hand wordt herkend op de rechter handgreep.
 - ➔ Remmen deactiveert de functie van de obstakelknop.

2.8.7 Herkenning van de ingeklapte toestand

- ello herkent wanneer hij wordt ingeklapt en schakelt zichzelf dan uit.

2.8.8 Signaalkleur bij hoogteverstelling

- Een oranje element waarschuwt u als de hoogteverstelling van de grepen niet correct is bevestigd.

2.8.9 Functiebeperking tijdens opladen

- Tijdens het opladen kan de ello niet elektrisch worden gebruikt om het risico bij struikelen over de laadkabel te minimaliseren.

2.8.10 Rugriem

- De rugriem van ello voorkomt dat u achterover van het apparaat valt als u het zitje gebruikt.

2.8.11 Brandveiligheid

- Het materiaal van de accubehuizing heeft een brandbeveiligingsclassificatie van V-1 (UL 94) om het risico op brand door de accu te beperken.

2.8.12 Vermijding van brandwonden

- Handgrepen, zitjes en rugriemen zijn gemaakt van materialen die hitte slecht doorgeven aan het menselijk lichaam.
- De zitjes zijn niet zwart en warmen dus minder op in de zon.

2.8.13 Zittingvlakken met profiel

- Het profiel in de zitjes verlaagt het risico dat u per ongeluk van de zitje afglijdt.

3. Productbeschrijving

3.1 Functieoverzicht


ello is bijzonder eenvoudig te bedienen en werkt op basis van zijn sensorgegevens.

ello herkent hellingen en past zich automatisch aan: Hij remt af in afdalingen en biedt ondersteuning bij bergop lopen.

Een additionele, sterkere elektrische hulp kan worden geactiveerd met de obstakelknop. Deze helpt om de voorwielen omhoog te zetten (wheelie) om obstakels te overwinnen of maakt het rijden op oneffen ondergrond gemakkelijker. Deze functie is niet bedoeld om de gebruiker permanent te trekken.

Als ello is ingeschakeld, zijn extra veiligheidsfuncties actief. In uitgeschakelde toestand kan ello worden gebruikt als een conventionele rollator.

3.2 Componenten

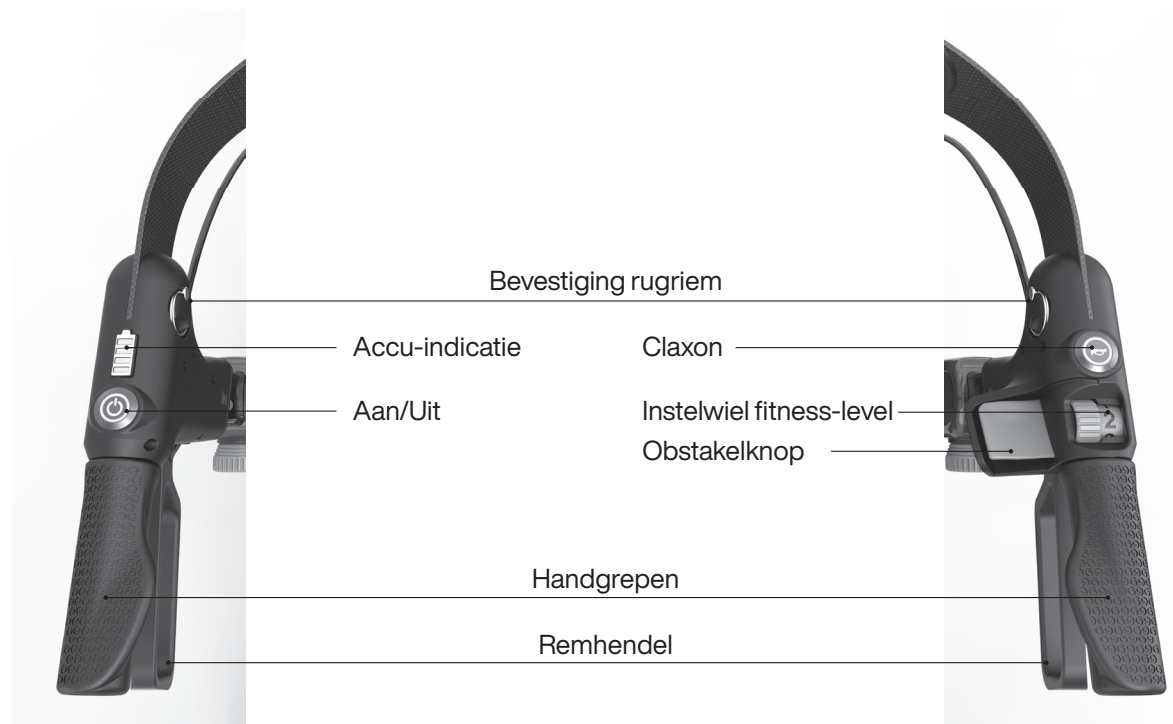



3.3 Bediening

3.3.1 Remmen

⚠ **VOORZICHTIG** Schakel de parkeerrem in tijdens pauzes.
ello zou anders onopgemerkt kunnen wegrollen - vooral op hellingen. Trek daarom tijdens pauzes altijd de parkeerrem aan.



Looprem: Trek de remhendel omhoog



Parkeerrem aanleggen: Druk de remhendel omlaag tot deze vastklikt. Om de parkeerrem vrij te geven, trekt u de hendel omhoog (naar de neutrale stand).

3.3.2 Fitness-level instellen

Hoe fitter u bent, hoe hoger het fitness-level dat u moet kiezen. Dit niveau is gepersonaliseerd en hoeft in het dagelijks leven niet aangepast te worden.

Het fitness-level is van invloed op:

- Remmende ondersteuning bij bergaf lopen. Hoe hoger het fitness-level, hoe minder ello u afremt.
- Gedrag bij gebruik van de obstakelknop. Hoe hoger het fitness-level, hoe sterker de obstakelfunctie.



3.3.3 Rijden op een vlakke, horizontale ondergrond

ello levert niet zelfstandig tractie op een vlakke ondergrond.

- Op moeilijkere oppervlakken kan extra ondersteuning worden geactiveerd door op de obstakelknop te drukken.
- Veiligheidsfuncties van de ello zijn actief.

3.3.4 Bergop rijden op hellingen

- ello herkent automatisch hellingen en biedt overeenkomstig ondersteuning - slechts om zijn eigen gewicht te compenseren, niet om de gebruiker mee te trekken.
- De ondersteuning wordt gedeactiveerd, wanneer de remmen worden gebruikt.
- Extra ondersteuning kan worden geactiveerd door op de obstakelknop te drukken.
- De veiligheidsfuncties van de ello zijn actief.

3.3.5 Bergaf rijden

⚠ GEVAAR Bedien de obstakelknop niet bij afdalingen.

Door op de obstakelknop te drukken wordt de automatische remfunctie op hellingen gedeactiveerd - risico op een val!

- ello herkent hellingen automatisch en remt overeenkomstig.
- De remkracht is afhankelijk van het ingestelde fitness-level:
 - Hoogste niveau: Zwakke remwerking.
 - Laagste niveau: Sterke remwerking
- ➔ Verhoog het fitness-level, als de remwerking bergaf te sterk is.
- U kunt ook mechanisch remmen met de remhendels - net als bij een conventionele rollator.
- De veiligheidsfuncties van de ello zijn actief.

3.3.6 Zitten op de ello

⚠ **GEVAAR** Vergeet niet de parkeerremmen aan te trekken.

ello kan onbedoeld gaan weggrollen als de parkeerrem niet is aangetrokken - hoog risico op een val!

⚠ **WAARSCHUWING** ello mag alleen op een horizontale ondergrond als zijte worden gebruikt.

ello is slechts in beperkte mate in staat om weggrollen op een helling te voorkomen, als de gebruiker erop zit.

1. Gebruik de parkeerremmen.
2. Zorg ervoor dat de rugriem correct gemonteerd is. De bevestiging ligt na correcte montage gelijk met de handgreep (zie afbeelding).
3. Neem voorzichtig plaats op de ello.



3.3.7 Obstakels overwinnen met ello

1. Trek de ello iets naar u toe en druk tegelijkertijd op de obstakelknop.
2. De voorwielen gaan omhoog. Duw de voorwielen over het obstakel en laat de obstakelknop los.
3. Bedien de remmen. De voorwielen komen weer op de grond.
4. Duw de achterwielen over het obstakel.
5. Druk indien nodig nogmaals op de obstakelknop.

3.3.8 Bij een trede omlaag stappen

⚠ **WAARSCHUWING** Gebruik de ello niet om bij een afstap van ≥ 20 cm af te dalen.

De ello kan kantelen als u van een te hoge trede probeert af te stappen - risico op een val!

- De ello remt automatisch af bij het afdalen bij een afstap om het risico op een val te minimaliseren - zowel bij het voorwaartse als achterwaartse afdalen.

3.3.9 De accu-indicatie begrijpen

- De accu-indicatie op de linker handgreep heeft 4 (vier) oplaadbalkjes.
- Laad de accu uiterlijk op als er nog maar 2 (twee) oplaadbalkjes (oranje) branden.
- Als de laatste oplaadbalk rood knippert, staat ello in de energiebesparingsmodus. Sommige functies kunnen slechts beperkt worden gebruikt in de energiebesparingsmodus.

💡 **Tip:** Schakel ello uit, als u hem niet gebruikt. Zo ontziet u de accu.

3.3.10 Claxoneren

- Druk op de claxon (op de rechterhandgreep).



3.4 Omgang met de ello

3.4.1 ello klaarmaken voor gebruik

⚠ **LET OP Risico op beknelling bij het in-/uitklappen.**

U kunt uw vingers beknellen als u de ello onvoorzichtig openklapt.

1. Let erop dat de parkeerremmen aangelegd zijn.
2. Verwijder de transportvergrendeling.
3. Klap de ello voorzichtig uit en controleer of hij volledig is opengeklapt is.
4. Controleer uw persoonlijke fitness-level (stelwiel op de rechter handgreep).
5. Schakel ello in (houd de aan/uit-schakelaar 1 seconde ingedrukt).
6. Geef de parkeerremmen vrij.



3.4.2 ello na gebruik opbergen

⚠ **VOORZICHTIG** Berg de ello op de juiste manier op.

Bewaar ello op een droge plek om schade te voorkomen.

1. Gebruik de parkeerremmen.
2. U kunt ello uitzetten of inklappen (het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het wordt ingeklapt).
3. Optioneel: Bevestig de transportvergrendeling.

3.4.3 Vervoer per auto

1. ello inklappen.
2. Bevestig de transportvergrendeling om onbedoeld uitklappen te voorkomen.
3. ello in de auto tillen.

💡 **Tip:**

- Verwijder de accu om het gewicht te verlagen.
- Stel de hoogte van de handgrepen in op het laagste niveau om de afmetingen te verkleinen.



3.4.4 Vervoer met het openbaar vervoer

⚠ **GEVAAR** Gebruik de ello niet in het openbaar vervoer - hoog valrisico.

ello is geen geschikte zitgelegenheid in voertuigen van het openbaar vervoer vanwege zijn wielen.

1. Parkeer ello in het aangewezen gedeelte.
2. Parkeerremmen aanleggen.
3. Neem plaats op een gemarkeerde stoel.

3.4.5 Optillen

⚠ **WAARSCHUWING** Til de ello voorzichtig op - valgevaar.

Til ello alleen als u daar fysiek toe in staat bent. Vraag anders om hulp.

1. Klap ello in
2. Bevestig de transportvergrendeling
3. Pak de ello vast bij de vouwhandgreep en het frame



3.4.6 Accu opladen

⚠ GEVAAR Stel de accu niet bloot aan overmatige zon/hitte.

Laad de accu van de ello niet op in de zon.

Accu in het apparaat opladen

1. Steek de oplader in de accu via de opening in het accuvak.
2. Steek de acculader in het stopcontact.
 - De accu-indicatie knippert tijdens het opladen.
 - Tijdens het opladen functioneert ello niet.

Verwijderde accu opladen

1. Open het accuvak en verwijder de accu.
2. Sluit de acculader aan op de accu.
3. Steek de acculader in het stopcontact.

LED-indicatie van de lader

Groen: Accu volledig opgeladen of niet ingeplugd.

Oranje: Accu wordt opgeladen.

3.5 Instelling

3.5.1 Juiste greephoogte kiezen

⚠ LET OP Stel de hoogte van de handgreep correct in.

Een verkeerd gekozen greephoogte kan houdingsproblemen tot gevolg hebben.

1. De bovenkant van de greep moet zich op polshoogte bevinden (zie afbeelding).
2. Controleer of beide handgrepen op dezelfde hoogte zijn ingesteld.




Minimale greephoogte: 80 cm

Maximale greephoogte: 100 cm

3.5.2 Handgrepen instellen

⚠ VOORZICHTIG Controleer of de hoogteverstelling correct gefixeerd is.
Zolang de oranjekeurige component zichtbaar is, is de hoogteverstelling niet correct gefixeerd.


1. Draai de draaiknop linksom ↺ open.
2. Trek aan de draaiknop en stel de gewenste hoogte in.
3. Laat de draaiknop los en laat hem vastklikken.
4. Draai de draaiknop rechtsom ↻ dicht.

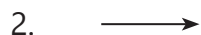

3.5.3 Remkracht nauwkeurig afstellen

⚠ GEVAAR Controleer de reminstellingen regelmatig.
Verkeerd afgestelde remmen kunnen tot ernstige ongelukken leiden.

1. Draai de bevestigingsmoer (A) → linksom (in de richting "+").
2. Stel de remkracht in → draai aan de stelschroef (B):
 - Rem versterken → (B) linksom draaien (in de richting "+").
 - Rem losser zetten → (B) rechtsom draaien (in de richting "-").
3. Draai de bevestigingsmoer (A) weer vast → rechtsom draaien (in de "-" richting).

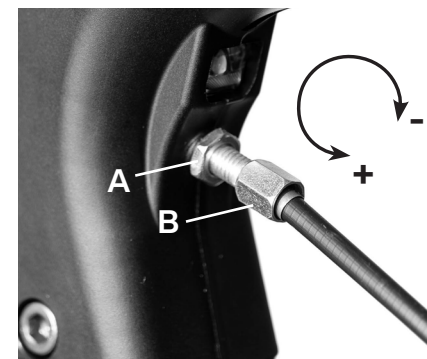

3.5.4 Verzorging & Onderhoud

⚠ **LET OP Niet reinigen met stromend water.**

Reinigen met stromend water/hoge druk kan de ello beschadigen.

- Maak ello schoon met een vochtige doek.
- Gebruik indien nodig een ontsmettingsmiddel of een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd overmatige vloeistof of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Laat ello regelmatig (minstens eens per 6 maanden) onderhouden door uw servicepartner.

4. Foutweergave

Foutcode	Oorzaak	Wat te doen?
Knoppen knippen blauw. Rollator gaat uit.	Sensoren herkennen dat ello ingeklapt is.	Verzekert u ervan dat de ello volledig opengeklapt is. Breng zo nodig de ello naar het servicecentrum.
Knoppen knippen geel. Functies kunnen beperkt zijn.	ello oververhit of herkent tijdelijke spanningsdaling.	Schakel ello tijdelijk uit en laat hem zo nodig afkoelen.
Knoppen branden geel. Functies kunnen beperkt zijn.	Fout herkend.	ello kan binnen korte tijd worden gebruikt. Breng hem zo spoedig mogelijk naar het servicecentrum.
Knoppen branden rood. Elektrische functies zijn uitgeschakeld.	Ernstige fout herkend.	Schakel ello uit en breng hem naar het servicecentrum.

5. Opmerkingen over de accu

1. Algemeen

- De accu niet doorboren of op een andere manier beschadigen.
- Laat de accu niet vallen.
- Verwijder de accubehuizing niet.
- Houd de accucontacten uit de buurt van metalen voorwerpen om kortsluitingen te vermijden.

2. Transport

- Vermijd temperaturen boven 60 °C en onder -10 °C tijdens transporten.
- Vermijd grote schokken en mechanische belastingen tijdens het transport.

3. Opslag / opbergen

- Bewaar de accu op een droge, koele plaats.
- Bescherm de accu tegen vuur en soortgelijke warmtebronnen.
- Vermijd contact met vloeistoffen, vooral water.
- Bewaar de accu bij een oplading van ongeveer 50-70 % om de levensduur te verlengen.
- De opslagtemperatuur moet tussen 15 °C en 25 °C liggen.

4. Afvalverwijdering

- Gooi een afgedankte accu nooit bij het gewone huishoudelijke afval.
- De accu kan worden teruggebracht naar de speciaalzaak waar de ello is gekocht. U kunt de accu ook naar een erkend recyclingcentrum of inzamelpunt brengen.
- Plak de contacten van de in te leveren accu af om kortsluiting te voorkomen.
- Verzekert u er bij recycling door derden van dat de plaatselijke milieunormen worden nageleefd.

6 Technische specificaties

6.1 Apparaat

	maximale belasting	
Gewicht gebruiker	120 kg	
Belading tas	5 kg	
	Model 55R/G/B	Model 62R/G/B
Zithoogte	55 cm	62 cm
Greephoogte	80 cm - 100 cm	80 cm - 100 cm
	uitgeklapt	gevouwen
Breedte	64 cm	34,5 cm
Diepte	72,5 cm	72,5 cm
	zonder accu	met accu
Gewicht	12 kg	12,2 kg
Beschermingsgraad	IP23	
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C - 40 °C	

6.2 Accu

Soort	Oplaadbare li-ion accu
Massa	ca. 430 g
Nominale capaciteit	3,2 Ah
Spanning	Bedrijf: 25,9 V Laden: 29,4 V
Energiecapaciteit	82,88 Wh → Geschikt voor vervoer in vliegtuigen (handbagage)
aanbevolen brandblusser	Poederblusser, droog poeder
Laadstroom	1 A
Looptijd (bij gemiddeld gebruik)	1 week
Bedrijfstemperatuurbereik	Ontladen (gebruik): -20 °C ~ 55 °C Opladen: 0 °C ~ 45 °C
Temperatuurbereik bij opslag	-10 °C ~ 60 °C

Fabrikant

VOSS healthcare GmbH
Jülicher Straße 306
52070 Aken
Duitsland
www.voss-healthcare.net
info@voss-healthcare.net
+49 241 510 056 22

Zorgwinkel



Dit product voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2017/745
betreffende medische hulpmiddelen.

Onderdeelnummer: 7011495000

Versie: v01.0NL

ello
by VOSS healthcare